

Тепловой массажер

CGN-120-2A



Инструкция по применению





СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Технические характеристики
- 02 Особенности
- 03 Показания к применению
- 04 Описание изделия
- 05 Эксплуатация
- 06 Внимание
- 07 Меры Предосторожности
- 08 Противопоказания
- 09 Обслуживание и хранение
- 10 Гарантия

Благодарим за использование термомассажера. Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием. Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ: тепловой массажер
- МОДЕЛЬ: CGN-120-2A
- НАПРЯЖЕНИЕ АДАПТОРА: 220В/12В 50Гц
- МОЩНОСТЬ: 30Вт
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 30-60 МИН
- ВЕС НЕТТО: 0,5 КГ
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: -5 +35°C
- КОЛЛИЧЕСТВО ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ АНИОНОВ: ≥ 1000 единиц



ОСОБЕННОСТИ

Термотерапия, основанная на принципах китайской медицины, на современном научно-техническом уровне;

Размеры нефритовых сфер, их высота и расстояние между ними, сконструированы в соответствии с размещением акупунктурных точек на теле человека;

Испускаемые анионы усиливают перенос кислорода кровью, устраняют неприятные запахи;

Термомассажер сконструирован для применения на различных участках тела. Изделие может использоваться для массажа и прогревания длинноволновыми инфракрасными лучами ушей, плеч, передней и задней части шеи, лица, спины, живота, поясницы, рук, ступней ног, нижней части таза;

Также может применяться в косметологических целях. Совместное использование термомассажера с прибором мягкой теплоты (не входит в комплект) расширяет спектр возможного применения;

Безопасный элемент электрического питания;

6-и уровневней регулировки температуры;

Интеллектуальный контроль температуры;

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Используется для термотерапии в соответствии с принципами китайской традиционной медицины

Расшищает каналы жизненной энергии Ци в человеческом организме

Стимулирует циркуляцию крови

Прекращает воспаление, снимает боль, обладает бактерицидным действием

Усиливает биологические функции организма

Устраняет неприятные запахи

Осуществляет профилактику и контроль над образованием патологических процессов.

Мужчины


1. Воспаление предстательной железы (простатит)
2. Геморрой, трещины заднего прохода, выпадение прямой кишки
3. Запоры, затруднения с мочеиспусканием, резь и боль при мочеиспускании, недержание мочи, задержка мочи
4. Расстройство в работе желёз внутренней секреции
5. Невралгия седалищного нерва (ишиас)
6. Импотенция.

Женщины

1. Воспаление мочеполовой системы
3. Менструальные боли, нарушение менструального цикла
4. Обильные бели с красноватыми выделениями
5. Расстройство в работе желёз внутренней секреции
6. Невралгия седалищного нерва (ишиас)
7. Поддержание в здоровом состоянии матки и яичников в мочеполовой системе.



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

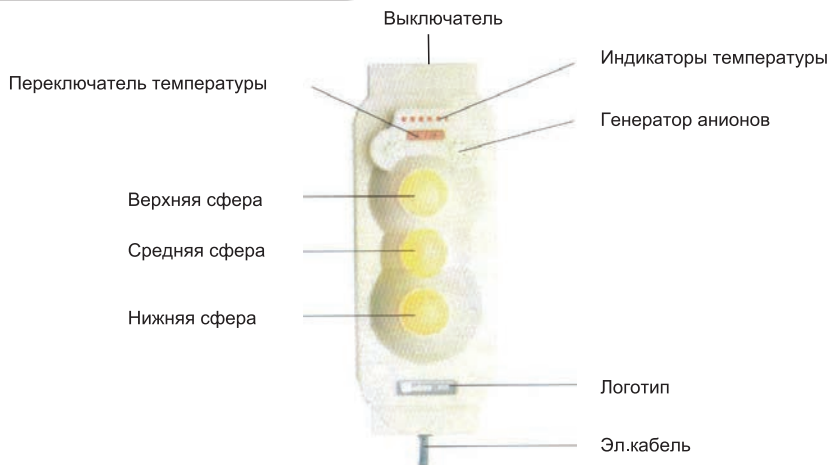

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение прибора

Возьмите штекер провода 220 Вольт (штекер имеет 8-образную форму) и воткните его в адаптер электрического питания, затем воткните вилку в розетку 220 Вольт. Нажмите выключатель, расположенный сбоку на верхней части изделия, в это время должны загореться 3 красных индикатора температуры длинноволнового инфракрасного излучения, расположенные на верхней части термомассажера. Одновременно загораются 3 специальные лампы, являющиеся источником нагрева трех нефритовых сфер и источником ИК тепла, что указывает на готовность термомассажера к использованию.

Регулировка температуры

Нажмите правую красную кнопку переключателя температуры, расположенную в верхней части прибора, сразу загорится еще один индикатор температуры (всего 6), что свидетельствует о повышении температуры. Нажатие левой красной кнопки приведёт к снижению температуры. В обычных условиях, когда вместе загорается от одного до шести индикаторов, температура нефритовых сфер держится в диапазоне 40 ~ 65°C. Потребитель может регулировать температуру в соответствии с практической необходимостью. Во время подачи тепла и достижения заданной температуры или в режиме поддержания температуры уровень светоизлучения ламп снижается вследствие того, что данный массажер автоматически снижает скорость набора температуры. Половинная яркость свидетельствует о режиме поддержания температуры.



Включение анионов

Пальцем руки нажмите примерно на одну секунду на резиновую кнопку, расположенную в центре регулировки температуры, это запустит функцию генерирования анионов.

Установка Прибора мягкой теплоты (гнезда здоровья - не входящего в комплектацию).

Сначала установите термомассажер продольно на стуле (также возможна установка на софу или кресло), затем установите на него Прибор мягкой теплоты (гнездо здоровья) CGN-120-2AB (приобретается отдельно). Обратите внимание на то, что электрический провод не должен сильно гнуться или испытывать давление.

Использование термомассажера в положении сидя.

Когда вышеуказанные операции выполнены, можно использовать прибор сидя. Поза для использования термомассажера мужчинами и женщинами практически одинакова. Процедуры: прогревание ИК теплом, прижигание и массаж шиацу акупунктурных точек в области промежности продолжается 10 ~ 15 минут; затем переместитесь на 2-3 см вперед и через 10 ~ 15 минут на 2-3 см назад от средней точки на массажере, после чего можно взять прибор в руки, начать прогревание нижней части живота, процедура может продолжаться 15 ~ 20 минут. Все эти процедуры вы можете делать дома во время чтения книжек, просмотра ТВ, отдыха или во время сидячей работы.

Использование для других участков тела

Помимо использования в сидячем положении термомассажер можно применять на других участках человеческого тела. Например, проводить термотерапию, нацеливая нефриновые сферы на плечевой пояс, тыльную часть шеи, лицо, голову, а также поясничный отдел, что в равной степени обеспечивает физиотерапию и заботу о здоровье. Так же лежа на ровной и жесткой поверхности, можно делать прижигание, воздействие ИК теплом и надавливание (акупунктуру) на биологически важные точки на спине. Воздействовать ИК теплом термомассажера можно практически на все участки тела, кроме сердечной области и области виска. Следите за температурой во избежании ожогов.

Выключение термомассажера

Переключите чёрный клавишный переключатель питания в верхней боковой части массажера в положение "0", после чего раздастся щелчок, индикатор электропитания погаснет, а массажер выключится. Выдерните вилку из эл.розетки.

Автоматическое выключение термомассажера

В случае, если после установки Пользователем заданной температуры, в течение двух часов не происходит изменения значения температуры или произвольных попыток выключения, массажер расценивает ситуацию, как выход из-под контроля и прекращает подачу тепла. Остаются гореть только два крайних индикатора температуры, остальные гаснут. Если необходимо повторное использование, достаточно нажать клавишу регулировки температуры или повторно нажать выключатель, и прибор восстановит все функции.



ВНИМАНИЕ

Это изделие не предназначено для использования взрослыми людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями. Изделие может использоваться только под наблюдением взрослых.

Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая. Выключите питание, извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.

- 1. Если изделие упало и было повреждено или внутрь изделия попала вода.*
- 2. Если поврежден сетевой шнур или эл.вилка.*
- 3. Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.*

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте тепловой массажер по назначению.
2. После включения и перед использованием, проверьте рукой температуру нефритовых сфер, установите комфортную температуру, чтобы не получить ожог.
3. В случае непосредственного контакта с кожей, необходимо предварительно провести дезинфекцию изделия.
4. Используйте изделие через хлопчатобумажную салфетку.
4. Будьте осторожны с изделием во время его использования, не допускайте ударов, падений или перегиба электрического провода, это продлит срок службы изделия.
5. Подключайте адаптер массажера к электрической розетке только надлежащего эл.питания (220В).
6. Допустимая влажность окружающей среды: $\leq 80\%$.
7. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
8. Держите массажер вдали от детей.
9. Продолжительность применения на каждый участок тела должна составлять не менее 10 минут.
10. Лицам с повышенной чувствительностью к теплу или тонкой чувствительной кожей, а также лицам с сахарным диабетом следует соблюдать осторожность при пользовании термомассажера. Устанавливайте температуру чуть ниже обычной во избежание ожогов.
11. Наилучший эффект достигается при длительном использовании (не менее 3 недель) в случае 2-х процедур в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В следующих состояниях необходимо проконсультироваться со специалистом:

- онкология;
- гипертонический криз;
- гипертермия
- высокая температура;
- туберкулез активной формы;
- алкогольное опьянение.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке термомассажера или силового кабеля.
2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки термомассажера.
4. Храните термомассажер в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
6. Не подключайте или отключайте изделие от розетки мокрыми руками, может привести к удару электрическим током или выходу массажера из строя.

ГАРАНТИЯ

Компания предоставляет гарантию на продукцию в соответствии с законом по защите прав потребителя.

Если возникли какие-либо проблемы с продукцией, позвоните в демонстрационный центр, в котором вы приобрели данное оборудование или в ближайший центр

Наименование		ДИЛЕР (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)
Серийный номер модели		
Покупатель		
Адрес Телефон		
Дата покупки		
		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД _____ с момента покупки

Гарантийный ремонт продукции осуществляется в течение **1 года**. Продолжительность гарантии может быть ограничена, если оборудование использовалось в коммерческих целях.

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Производитель: ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS I/E CO., LTD., ZMC BUILDING, 101-2, N.ZHONGSHAN ROAD, HANGZHOU, 310003, CHINA

По заказу: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, www.llotus.ru